

HARMONIX

DK

TravelerAI-serien



Manual til LCD-opladningsetui T110-BLK T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-DK
August 2025

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

Betjening af opladningsrum



Belysning af skærmen

Metode 1: Åbn dækslet til opladningsrummet, displayet lyser automatisk.

Metode 2: Når skærmen er slukket, skal du klikke på skærmen for at dreje den.

Metode 3: Tryk én gang på multifunktionsknappen under opladningsetuiet for at lyse skærmen op.

Sluk skærmen

Automatisk nedlukning: Efter at have tændt skærmen i 30 sekunder uden betjening. Skærmen slukkes automatisk.

Manuel lukning: Tryk én gang på multifunktionsknappen til opladningsetui for at slukke for skærmen.

Bemærk: Første gangs brug skal du aktivere strømmen

Metode 1. Oplad og aktivér ladekassen gennem TYPE-C-grænsefladen.

Metode 2. Tryk længe på multifunktionsknappen på opladningsetuiet i 5 sekunder for at tænde enheden

Tip: Dette produkt går som standard i nedlukningstilstand, når det forlader fabrikken. Første brug kræver aktivering og opsætning.

Låseskærms grænseflade

Lås op: Skub til højre for at låse skærmen op



Musik grænseflade



Sidste sang



Afspil / pause



Næste sang

Interface til justering af lydstyrke



Reducer lydstyrken, minimum lydstyrke er 0



Forøg lydstyrken, maksimal lydstyrke er 16

Space Sound-grænseflade



Musiktilstand
Filmtilstand
Spiltilstand

Equalizer-grænseflade



Skift mellem forskellige EQ-lydeffekter:
Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz

Timer Alarm Interface



Skift kræver indstilling af
nedtællingsalarmtidspunktet: 5 minutter, 10
minutter, 30 minutter, 60 minutter

Grænseflade til sprogskift



Klik for at skifte sprog

Lysniveau grænseflade




Klik på venstre knap for at mindske skærmens
lysstyrke. Klik på knappen til højre for at øge
skærmens lysstyrke.

Find min øretelefon-grænseflade



Klik på L/R-knappen, og 1 vises

①

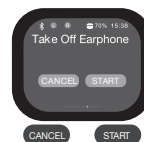

Klik for at annullere og afslutte denne funktion
Klik for at starte, tallet 2 vises, og hovedtele-
fonhøjtaleren begynder at udsende lyden

②



Klik på stopknappen for at stoppe advarslen

Tiktok sidevending funktion

Skal tilsluttes en trådløs håndsætning, f.eks. en mobiltelefon.

1. Denne funktion er kun tilgængelig til brug med TIKTOK-software, og anden software fungerer ofte ikke med den.
2. Denne funktion kan have kompatibilitetsproblemer med nogle telefoner, og nogle telefoner kan muligvis ikke bruge den.
3. Hvis der er situationer, hvor den ikke kan bruges, skal du ignorere denne funktion



Klik på dette ikon, den aktuelle korte video vil blive liket



Hvis du klikker på dette ikon, skifter du til den forrige korte video



Hvis du klikker på dette ikon, skifter du til den næste korte video

Lommelygte grænseflade



OPEN

Klik på knappen for at tænde lommelygten, hele skærmen bliver hvid, og skærmens lysstyrke øges.

Fotografering funktion

Skal tilsluttes en trådløs håndsætning, f.eks. en mobiltelefon


1. Denne funktion er kun tilgængelig til at tage billeder med telefonens indbyggede kamera. Anden optagesoftware kan muligvis ikke bruge den.
2. Denne funktion kan have kompatibilitetsproblemer, og nogle telefoner kan muligvis ikke bruge den.
3. Hvis der er situationer, hvor den ikke kan bruges, skal du ignorere denne funktion.



Åbn telefonens kamera, klik på knappen, og telefonen begynder at tage billeder.

Bemærk: Når du ikke er i optagetilstand, øges lydstyrken ved at klikke på denne fotoknap.

Definition af multifunktionelle knappers funktion.

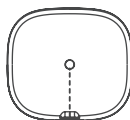

Multifunction key



Klik én gang: Til/Fra skærm

Langt tryk i 3 sekunder: I tændt tilstand skal du trykke længe i 3 sekunder, og skærmen vil poppe op for nedlukning og genstart.

Ved at klikke på ikonet kan du opnå nedlukning eller genstart.

Langt tryk i 8 sekunder: I nedlukningstilstand skal du trykke længe i 8 sekunder for at tænde enheden.

Langt tryk i 10 sekunder: Genstart systemet (displayet viser startskærmen)

Denne handling kan udføres, når systemet går ned og ikke kan betjenes.

Harmonix kundeservicelink



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA