

HARMONIX

ES

Serie TravelerAI



Manual del estuche de carga LCD

T110-BLK

T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-EN
August 2025

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

Funcionamiento del compartimento de carga



Iluminación de la pantalla

Método 1: Abra la tapa del compartimiento de carga, la pantalla se iluminará automáticamente.

Método 2: Cuando la pantalla esté apagada, haga clic en la pantalla para girarla.

Método 3: Presione el botón multifunción ubicado debajo del estuche de carga una vez para iluminar la pantalla.

Apagar la pantalla de visualización

Apagado automático: Después de encender la pantalla durante 30 segundos sin operación. La pantalla de visualización se apagará automáticamente.

Cierre manual: presione el botón multifunción del estuche de carga una vez para apagar la pantalla

Nota: Por favor, enciéndalo al principio.

Método 1: Cargue y active el estuche de carga a través de la interfaz TIPO C.

Método 2: Mantenga presionado el botón multifunción del estuche de carga durante 5 segundos para encender el dispositivo.

Consejo: Este producto sale de fábrica en modo apagado. Para el primer uso, es necesario activarlo y configurarlo.

Interfaz de pantalla de bloqueo

Desbloquear: Desliza hacia la derecha para desbloquear la pantalla



Interfaz de música



Último Canción Reproducir / Pausa Próximo Canción

Interfaz de ajuste de volumen



Reducir volumen,
el volumen
mínimo es 0

Aumentar
volumen, el
volumen máximo
es 16

Interfaz de sonido espacial



Modo de música Película Modo Modo de juego

Interfaz del ecualizador



Cambia entre diferentes efectos de sonido de ecualización: Normal, Rock, Pop, Clásico, Jazz

Interfaz de alarma con temporizador



El cambio requiere configurar el tiempo de la alarma de cuenta regresiva: 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos

Interfaz de nivel de luz



Haga clic en el botón izquierdo para disminuir el brillo de la pantalla. Haga clic en el botón de la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.

Interfaz de cambio de idioma



Haga clic para cambiar de idioma

Interfaz de Find My Earphone



Haga clic en el botón L/R y aparecerá el 1

①



Haga clic para cancelar y salir de esta función. Haga clic para comenzar, aparecerá el número 2 y el altavoz de los auriculares comenzará a emitir el sonido.

②



Haga clic en el botón de detención para detener la alerta

Función de cambio de página de Tiktok

Debe estar conectado a un dispositivo de teléfono inalámbrico, como un teléfono celular.

1. Esta función solo está disponible para su uso con el software TIKTOK, y otros programas muchos no funcionan con él.
2. Esta función puede tener problemas de compatibilidad con algunos teléfonos y es posible que algunos teléfonos no puedan usarla.
3. Si hay situaciones en las que no se puede usar, ignore esta función



Haga clic en este icono, le gustará el video corto actual



Al hacer clic en este icono, se cambiará al video corto anterior



Al hacer clic en este icono, se pasará al siguiente video corto

Interfaz de linterna



OPEN

Haga clic en el botón para encender la linterna, toda la pantalla se vuelve blanca y el brillo de la pantalla aumenta.

Función de fotografía

Debe estar conectado a un dispositivo de teléfono inalámbrico, como un teléfono celular


1. Esta función solo está disponible para tomar fotos con la cámara incorporada del teléfono. Es posible que otro software de disparo no pueda usarlo.
2. Esta función puede tener problemas de compatibilidad y es posible que algunos teléfonos no puedan usarla.
3. Si hay situaciones en las que no se puede usar, ignore esta función.



Abra la cámara del teléfono, haga clic en el botón y el teléfono comenzará a tomar fotos.

Nota: cuando no esté en modo de disparo, al hacer clic en este botón de foto aumentará el volumen.

Definición de la función de botones multifuncionales.

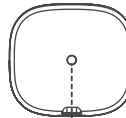

Multifunction key



Haga clic una vez: Pantalla de encendido/apagado

Mantenga presionado durante 3 segundos: en el modo de encendido, mantenga presionado durante 3 segundos y en la pantalla aparecerán los íconos de apagado y reinicio.

Al hacer clic en el icono se puede lograr el apagado o el reinicio.

Pulsación larga durante 8 segundos: En el modo de apagado, mantenga pulsado durante 8 segundos para encender el dispositivo.

Pulsación larga durante 10 segundos: reinicie el sistema (la pantalla mostrará la pantalla de inicio)

Esta operación se puede realizar cuando el sistema se bloquea y no se puede operar.

harmonix.is
harmonixhearing.com

HARMONIX

**Enlace de servicio
al cliente de
Harmonix**



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA