

HARMONIX

IT

Serie TravelerAI



Manuale della custodia di ricarica LCD

T110-BLK
T111-WHI

Version: IFU-T11X-LCD-IT
August 2025

HARMONIX

harmonix.is
harmonixhearing.com

Funzionamento del vano di ricarica



Illuminazione dello schermo del display

Metodo 1: Aprire il coperchio del vano di ricarica, il display si illuminerà automaticamente.

Metodo 2: quando lo schermo è spento, fare clic sullo schermo del display per ruotarlo.

Metodo 3: premere una volta il pulsante multifunzione situato sotto la custodia di ricarica per illuminare lo schermo.

Spegni lo schermo

Spegnimento automatico: dopo aver acceso lo schermo per 30 secondi senza operazione. Lo schermo del display si spegnerà automaticamente.

Chiusura manuale: premere una volta il pulsante multifunzione della custodia di ricarica per spegnere lo schermo del display.

Nota: al primo utilizzo, attivare l'alimentazione.

Metodo 1: caricare e attivare la custodia di ricarica tramite l'interfaccia TYPE-C.

Metodo 2: premere a lungo il pulsante multifunzione sulla custodia di ricarica per 5 secondi per accendere il dispositivo.

Suggerimento: questo prodotto è impostato automaticamente in modalità di spegnimento al momento dell'acquisto. Il primo utilizzo richiede l'attivazione e la configurazione.

Interfaccia della schermata di blocco

Sblocca: scorri verso destra per sbloccare lo schermo



Interfaccia musicale



Ultima canzone Riproduci/ Canzone
Pausa successiva

Interfaccia di regolazione del volume



Riduci volume, il
volume minimo è 0

Aumenta il volume, il
volume massimo è 16

Interfaccia audio spaziale



Modalità musica Modalità di
Modalità film gioco

Interfaccia equalizzatore



Passa tra diversi effetti sonori EQ: Normale,
Rock, Pop, Classico, Jazz

Interfaccia di allarme timer



La commutazione richiede l'impostazione
dell'ora della sveglia per il conto alla rovescia:
5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, 60 minuti

Interfaccia del livello di luce



Fare clic sul pulsante sinistro per diminuire
la luminosità dello schermo. Fare clic sul
pulsante a destra per aumentare la luminosità
dello schermo.

Interfaccia di commutazione della lingua




Fare clic per cambiare
lingua

Interfaccia Trova il mio auricolare



Fare clic sul pulsante L/R e apparirà
l'1

①

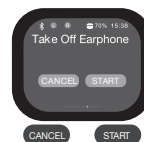

Fare clic per annullare e uscire da questa funzione
Fare clic per iniziare, apparirà il numero 2 e
l'altoparlante delle cuffie inizierà a emettere il
suono

②



Fare clic sul pulsante di arresto per
interrompere l'avviso

Funzione di sfogliamento delle pagine Tiktok

Deve essere collegato a un dispositivo portatile wireless, ad esempio un telefono cellulare.

1. Questa funzione è disponibile solo per l'uso con il software TIKTOK e altri software che molti non funzionano con esso.
2. Questa funzione potrebbe avere problemi di compatibilità con alcuni telefoni e alcuni telefoni potrebbero non essere in grado di utilizzarla.
3. Se ci sono situazioni in cui non può essere utilizzato, ignorare questa funzione



Fare clic su questa icona, il breve video corrente piacerà

Facendo clic su questa icona si passa al breve video precedente

Facendo clic su questa icona si passerà al breve video successivo

Interfaccia torcia



Fare clic sul pulsante per accendere la torcia, l'intero schermo diventa bianco e la luminosità dello schermo aumenta.

Funzione fotografica

Deve essere collegato a un dispositivo portatile wireless come un telefono cellulare


1. Questa funzione è disponibile solo per scattare foto con la fotocamera integrata del telefono. Altri software di ripresa potrebbero non essere in grado di utilizzarlo.
2. Questa funzione potrebbe avere problemi di compatibilità e alcuni telefoni potrebbero non essere in grado di utilizzarla.
3. Se ci sono situazioni in cui non può essere utilizzato, ignorare questa funzione.



Apri la fotocamera del telefono, fai clic sul pulsante e il telefono inizierà a scattare foto.

Nota: quando non è in modalità di scatto, facendo clic su questo pulsante della foto si aumenterà il volume.

Definizione della funzione dei pulsanti multifunzione.

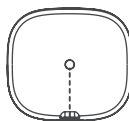

Multifunction key



Fare clic una volta: On/Off schermo

Premere a lungo per 3 secondi: in modalità di accensione, premere a lungo per 3 secondi e sullo schermo verranno visualizzate le icone di spegnimento e riavvio.

Facendo clic sull'icona è possibile ottenere l'arresto o il riavvio.

Premere a lungo per 8 secondi: in modalità di spegnimento, premere a lungo per 8 secondi per accendere il dispositivo.

Premere a lungo per 10 secondi: riavviare il sistema (il display mostrerà la schermata di avvio) Questa operazione può essere eseguita quando il sistema si arresta in modo anomalo e non può essere utilizzata.

**Servizio
clienti
Harmonix**



Harmonix ehf.
Reykjavíkurvegur 64,
220 Hafnafjörður
Iceland

Harmonix Technologies LLC
200 Crandon Blvd.,
Key Biscayne,
FL 33149,
USA